



ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ШС-200 СПУ.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания
2. Назначение изделия
3. Технические характеристики
4. Комплектность
5. Указания по безопасности
6. Устройство и принцип работы
7. Подготовка изделия к эксплуатации
8. Подготовка к работе
9. Рекомендации по загрузке шкафа
10. Использование шкафа
11. Возможные неисправности и способы их устранения
12. Транспортирование и хранение
13. Гарантии изготовителя
14. Свидетельство о приемке
15. Свидетельство об упаковывании
16. Сведения о рекламациях
- Приложение 1. Талон №1 на гарантийное обслуживание.
- Приложение 2. Талон №2 на гарантийное обслуживание.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации шкафа сушильного ШС-200-СПУ (в дальнейшем – шкаф) должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

1.2 Техническое обслуживание, гарантийный и текущий ремонт шкафа осуществляется персоналом специализированных служб, прошедших соответствующую подготовку.

1.3 К работе со шкафом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие специальную подготовку.

1.4 Проверка, наладка и ремонт шкафа должны проводиться специалистами, изучившими техническую и эксплуатационную документацию на шкаф и имеющие группу допуска не ниже третьей при работе на электроустановках до 1000 В.

1.5 В связи с постоянным усовершенствованием изделий, внесением конструктивных изменений, повышающих надёжность и улучшающих условия эксплуатации, возможны незначительные расхождения между конструкцией шкафа и настоящим руководством по эксплуатации.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Шкаф предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, чашек Петри, колб, инструментов, жирных масел, термостойких порошков и других материалов.

Шкаф обеспечивает непрерывное поддержание внутри рабочей камеры стабильной температуры.

2.2 Шкаф должен эксплуатироваться в помещениях с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25 °С и атмосферном давлении (84-107 кПа) 630-800 мм рт.ст.

2.3 Шкаф отнесен в виду климатического исполнения - УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

2.4 Шкаф имеет цифровую индикацию температуры и времени выдержки сушки, которая служит для наблюдения за изменением величин температур и времени.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные технические характеристики шкафа приведены в таблице 1
Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
1.Диапазон рабочих температур, °С	50...200	
2. Диапазон времени выдержки. мин	1...999	
3. Предельные отклонения температуры от заданной по объему рабочей камеры шкафа, °С	±5	
4. Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более	+5	
5. Время нагрева шкафа до температуры 200°С, мин, не более	20	
6. Потребляемая мощность, кВт, не более	3,5	
7. Объем рабочей камеры, дм ³ , не менее	200	
8. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: глубина х ширина х высота	460х660х660	
9. Габаритные размеры шкафа, мм, не более: глубина х ширина х высота	750х843х1175	
10.Масса, кг, не более	95	

3.2 Электропитание шкафа должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В с допустимым отклонением напряжения ±10% от номинального значения, частотой 50Гц

3.3 В шкафу предусмотрено аварийное отключение шкафа от сети при температуре в камере 205...235°С,

3.4 Шкаф обеспечивает возможность автоматического включения процесса сушки в заранее заданное время («ночной режим»).

3.5 В шкафу предусмотрена установка следующих скоростей нагрева: - 2°/мин, 5°/мин, 7°/мин, максимально возможная (нагрев включен постоянно).

3.6 Шкаф оснащен интерфейсом RS-232 для подключения к ЭВМ и программным обеспечением, позволяющим осуществить вывод температуры в шкафу и текущее время на экран ЭВМ. Эта информация записывается в текстовый файл для дальнейшего документирования. Порядок подключения шкафа к ЭВМ приведен на CD-диске.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки шкафа приведен в табл.2

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.
Шкаф сушильный	1
Полка*	3
Вставка плавкая ВП1-1 1А АГО.481.303ТУ	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1
Кабель для связи с ЭВМ	1
Диск с программным обеспечением	1

* по отдельному заказу могут быть поставлены дополнительные полки

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 По типу защиты от поражения электрическим током шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по классу защиты I.

5.2 Для подключения шкафа к сети использовать розетку, имеющую специальный заземляющий контакт типа F, который при монтаже необходимо присоединять к контуру заземления с сопротивлением не более 4 Ом.

5.3 Присоединение розетки к сети и проверку сопротивления заземляющего контура должен проводить аттестованный специалист, допущенный к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

5.4 Категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- работать с незаземленным шкафом или неисправным контуром заземления;
- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную систему, трубопроводы горючих жидкостей и т.п.
- включать шкаф в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки и соединительного шнура;
- разбирать шкаф, менять предохранитель, не отключив шкаф от сети;
- помещать в шкаф легко воспламеняющиеся материалы;

5.5 Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий шкаф, перед началом работы должен изучить данный документ.

6 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1 Основными узлами шкафа являются корпус, дверь с пультом управления и подставка.

6.2 На боковой поверхности корпуса расположен выключатель сети и разъем для подключения ЭВМ.

6.3 В подставке находятся: индикатор желтого цвета включения нагрева и индикатор красного цвета включения защиты при аварийном отключении шкафа от сети при температуре в камере значения 205...235°C.

6.4 Внутри корпуса монтируется рабочая камера из зеркальной нержавеющей стали. В рабочей камере расположена П-образная панель

6.5 Пространство между наружными поверхностями и поверхностями рабочей камеры заполнено теплоизолятором. Теплоизолятором также заполнено внутреннее пространство двери.

6.6. В воздушном канале, образованном задней стенкой рабочей камеры и П-образной панелью расположены крыльчатки, установленные на валу двигателей вентиляторов. Сами двигатели расположены на задней стенке рабочей камеры. Крыльчатки обеспечивают циркуляцию воздуха в камере.

6.7 За П-образной панелью на задней стенке камеры расположены электронагреватели, датчик температуры и датчик термореле.

На задней стенке корпуса находятся вставки плавкие.

Изделия для сушки размещаются на полках, устанавливаемых на полкодержателях.

6.8 На верхней поверхности шкафа имеется регулируемое отверстие для выхода пара, образующегося при сушке влажных предметов.

7 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. После доставки шкафа к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений упаковочного ящика в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией.

Если при приемке шкафа от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке шкафа автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

7.2 При отсутствии повреждений упаковки распаковать шкаф после выдержки его в условиях, указанных в п.2.2 настоящего руководства по эксплуатации не менее 4 часов, а при ее повреждении - после выполнения действий, указанных в п.7.1.

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства по эксплуатации и производится внешний осмотр шкафа на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

7.3 Для ввода шкафа в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства по эксплуатации.

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1 Для подготовки шкафа к работе необходимо:

- установить шкаф на место эксплуатации;
- очистить поверхность внутренней камеры шкафа от консервирующего покрытия с последующим протиранием ветошью, смоченной авиационным бензином, уайт-спиритом или другим органическим растворителем;
- смонтировать розетку, для этого необходимо соединить промаркированный заземляющий контакт розетки с контуром защитного заземления, имеющего электрическое сопротивление не более 4 Ом, два других контакта соединить с проводами питающей сети напряжением 220 В, 50 Гц.

8.2 Перед подключением шкафа к питающей сети убедиться в том, что напряжение сети питания соответствует указанному в руководстве по эксплуатации.

Примечание: Не рекомендуется устанавливать шкаф вблизи отопительной системы и нагревательных приборов.

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ ШКАФА

9.1 Загрузка шкафа в большой степени влияет на основные технические характеристики. При превышении загрузки увеличивается время нагрева, расход электроэнергии.

Изделия следует загружать в таком количестве, которое допускает свободную подачу воздуха к каждому предмету и на расстоянии не менее 50 мм от стенок рабочей камеры;


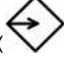

10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАФА



10.1 Установить полки на полкодержатели на нужных уровнях.

10.2 Разместить равномерно изделия для сушки на полках камеры в соответствии с разделом 9.



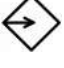
10.3 Вилку сетевого шнура включить в сеть.

10.4 Включить шкаф, с помощью выключателя сети, расположенного на боковой поверхности шкафа, при этом включатся вентиляторы, на индикаторах температуры «°C» панели управления (рисунок 1) появится текущая температура в камере.

Нажать клавишу . На цифровых индикаторах температуры «°C» высветится заданная ранее температура сушки, а на индикаторах времени заданное ранее время выдержки. Нажать клавишу «» «шкаф переходит в режим ввода программы индикаторы температуры начинают мигать, сигнализируя о возможности ввода температуры клавишами «▼» «▲». После повторного нажатия клавиши «» начинают мигать индикаторы времени, сигнализируя о возможности ввода времени выдержки клавишами «▼» «▲». После третьего нажатия клавиши «» индикаторы перестают мигать и введенные параметры сохраняются в памяти устройства управления.

10.5. Для включения шкафа в работу нажать клавишу «». На цифровых индикаторах «°C» высветится текущая температура в камере, а на индикаторах времени нули. Если заданная температура выше текущей температуры в камере загорится индикатор включения нагревателя желтого цвета, расположенный в внизу приборного отсека. При достижении заданной температуры в контрольной точке камеры, в течение некоторого времени происходит выравнивание температуры по объему камеры, а на табло времени отображается текущее время. При необходимости процесс можно прервать, нажав на клавишу «» на панели управления.

10.6 В изделии имеется возможность осуществлять нагрев с заданной скоростью.

Для ввода нужной скорости нагрева установить клавишей «» режим ввода программы. Нажать клавишу «», при этом индикаторы температуры начинают мигать. Нажать клавишу «V». При этом на индикаторах температуры появится надпись «C°/t», а на индикаторах времени «000». Ввести клавишей «▲» цифру, соответствующую необходимой скорости нагрева: «1» - 2°/мин; «2» - 5°/мин; «3» - 7°/мин; «0» - максимальная скорость. Нажать последовательно клавиши «» и «V». При дальнейшей работе шкаф будет осуществлять нагрев с заданной скоростью.

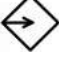


Для уменьшения первоначального выбега температуры рекомендуется вводить скорость нагрева 1-3.


10.7. После окончания времени выдержки звучит непрерывный звуковой сигнал.

10.8. Нажать на клавишу “”, открыть дверь и произвести выгрузку.

10.9 Ввод задержки времени включения шкафа («ночной режим»), которая предполагает включение нагрева шкафа через введенное время, осуществляется следующим образом:

Установить клавишей «.» режим ввода программы;

Нажать клавишу «» и удерживать в нажатом состоянии более 6 сек, при этом на индикаторах температуры индицируется значение введенной температуры, а на индикаторах времени – нули, сигнализирующие о возможности ввода времени ночного режима. Ввести клавишами «» «»

время задержки включения стерилизатора в минутах. Нажать клавишу «»». На индикаторах температуры появится текущая температура в камере, а на индикаторах времени – время оставшееся до включения режима (обратный отсчет времени). По истечении заданного времени включится процесс нагрева шкафа и далее по п.10.5

Время задержки включения нагрева шкафа в памяти устройства при выключении электропитания шкафа не сохраняется и требует, при необходимости, повторного ввода.

10.10 Для подключения шкафа к ЭВМ необходимо подключить к разъему, расположенному на боковой стенке шкафа, COM-порт ЭВМ с помощью кабеля COM-COM, и установить на ЭВМ с прилагаемого диска соответствующее программное обеспечение, позволяющее выводить на экран ЭВМ и записывать в текстовый файл данные о прохождении процесса сушки.

10.11 По окончании работы шкафа выключить выключатель сети и вилку сетевого шнура отключить от питающей сети.

Внимание! При аварийном росте температуры срабатывает термореле (температура срабатывания 205-235°C), и произойдет автоматическое выключение шкафа, при этом загорится индикатор защиты красного цвета, расположенный внизу приборного отсека

Внимание!

В случае, если на этапе времени выдержки в рабочей камере происходит понижение или повышение температуры от заданной на 10 °С (в результате аварии), звучит звуковой сигнал и включается индикатор «АВАРИЯ», происходит сброс времени на табло индикатора времени. Необходимо выключить шкаф и устранить причину возникновения аварии.

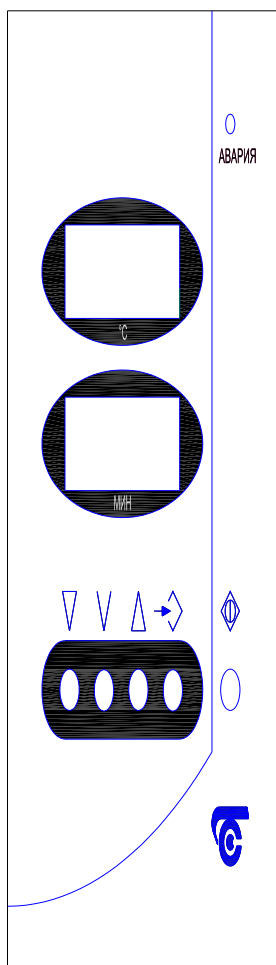


Рисунок 1 – Панель управления

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Возможные неисправности и способы их устранения

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины отказов и повреждений	Указания по устранению последствий отказов и повреждений
При включении в сеть не светится цифровая индикация	Отсутствие напряжения в сети Неисправные предохранители	Устранить неисправность в сети Заменить предохранители
Медленный выход на режим	По ошибке введена низкая скорость нагрева	Исправить введенную программу
Во время работы отключилось электропитание и горит индикатор красного цвета на подставке шкафа	Включилась защита и произошло аварийное отключение шкафа от сети. Температура в шкафу превысила значение 205... 235°C	Устранить причину перегрева. Для включения шкафа нажать на аварийном термореле кнопку, находящуюся на задней стенке
Отсутствует нагрев шкафа	Обрыв нагревателя	Обратиться в ремонтное предприятие

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании упакованного шкафа должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанные на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности шкафа.

12.2 Ящик с упакованным шкафом должен закрепляться так, чтобы исключить его перемещение в процессе транспортирования.

12.3 Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура от минус 50 до плюс 50°C;
- относительная влажность до 80% при температуре +20°C.

12.4 Шкаф должен храниться в упаковке в складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

12.5 Распаковку шкафа после хранения или транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав его в упаковке не менее 4 часов.

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ТУ 3442-024-00141798-2014 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных указанными техническими условиями и данным руководством по эксплуатации.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки изделия предприятием-изготовителем.

13.3. Гарантийный ремонт шкафа проводит предприятие-изготовитель - ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

13.4 При проведении гарантийного ремонта на предприятии изготовителе, потребитель производит возврат шкафа в упаковке предприятия -изготовителя или упаковывает шкаф за свой счет в упаковку, обеспечивающую его защиту от механических повреждений.

13.5 При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления шкафа в ремонт до окончания ремонта.

13.6 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации шкафа;
- при повреждении шкафа во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь шкафа посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных.
- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников шкафа, возникших в процессе эксплуатации.
- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;
- при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;
- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.

13.7 В случаях выхода шкафа из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**Шкаф сушильный ШС-200 СПУ**

заводской №

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий
ТУ 3442-024-00141798-2014 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись_____
расшифровка подписи_____
год, месяц, число**15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ****Шкаф сушильный ШС-200 СПУ**

заводской №

Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

должность_____
личная подпись_____
расшифровка подписи_____
год, месяц, число**16. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

16.1 Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

16.2 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

16.3 Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

16.4 Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

- заводской номер шкафа;
- дата получения шкафа с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;
- дата ввода в эксплуатацию;
- описание внешнего проявления поломки;
- какие узлы и детали сломались, изнашивались и т.д.

16.5 К рекламации следует приложить:

заполненный гарантийный талон;
акт о поломке.

16.6 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

16.7 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

16.8 В случае поломки шкафа после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Смоленское СКТБ СПУ"**

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Действителен по заполнению

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №1
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ**

Заполняет предприятие-изготовитель

Шкаф сушильный ШС-200 СПУ
заводской №

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Смоленское СКТБ СПУ"**

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Действителен по заполнению

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №2
В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ**

Заполняет предприятие-изготовитель

Шкаф сушильный ШС-200 СПУ
заводской №

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

 штамп ОТК

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер шкафа _____

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной
 детали _____ или _____ узла

Дата ремонта _____

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца шкафа,
 подтверждающего ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер шкафа _____

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной
 детали _____ или _____ узла

Дата ремонта _____

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца шкафа,
 подтверждающего ремонт _____

Штамп ремонтного предприятия
