



СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ МАШИНА КАСКАД СМ-100 ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ

- ✦ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ
- ✦ УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ✦ ГАРАНТИРОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Одна из главных задач в уходе за пациентом с ограниченными возможностями - это помощь в удовлетворении физиологических потребностей.









Для обеспечения помощи пациенту с ограниченной подвижностью при физиологических отправлениях необходимо определенное оборудование и расходные материалы.

Моюще-дезинфицирующая машина КАСКАД СМ-100

Специально разработана для очистки и дезинфекции подкладных суден, мочеприемников и иных предметов ухода за больными.

Машина предназначена для использования в клинических больницах, в заведениях по уходу (дома престарелых и т. д.), стационарах и других лечебно-профилактических организациях.

Особенности

-  Камера и наружные панели выполнены из нержавеющей стали
-  Высокое качество обработки достигается благодаря наличию неподвижных и вращающихся форсунок, подающих воду на наружные и внутренние поверхности изделия
-  Автоматический контроль засора слива
-  Датчик защиты от перегрева парогенератора
-  Для гарантированной дезинфекции в ходе рабочего цикла осуществляется подача пара через сопла
-  Два перистальтических насоса с возможностью регулировки объема подачи средств:
 - для подачи моющего средства
 - для подачи средства против образования накипи
-  Дверь оснащена электронной блокировочной системой (во время процесса дезинфекции дверь надежно блокируется)
-  Эффективность отмытки протестирована в соответствии с ГОСТ 15883-5



Рекомендованные средства



Средство для очистки медицинских изделий «DGM Steriguard EASY Clean»

Установлено по умолчанию в КАСКАД СМ-100
30 мл/цикл*




Средство для очистки медицинских изделий «DGM Steriguard EASY Forte»

Установлено по умолчанию в КАСКАД СМ-100
30 мл/цикл*

* Возможность регулирования дозирования в зависимости от используемых средств

Продвинутая система управления:

- Цветной русифицированный ЖК-дисплей с размером диагонали 7 дюймов
- Автоматическая система управления процессом и диагностикой состояния оборудования
- Четыре программы мойки с изменяемыми параметрами: короткая, стандартная, интенсивная, свободная и дополнительная программа самоочистки
- Отображение данных о процессе в виде графиков и таблиц
- Запрос-подтверждение на ЖК-экране о необходимости выполнения операции с целью предотвращения риска ошибок оператора
- Отображение аварийных сообщений
- Напоминание на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания

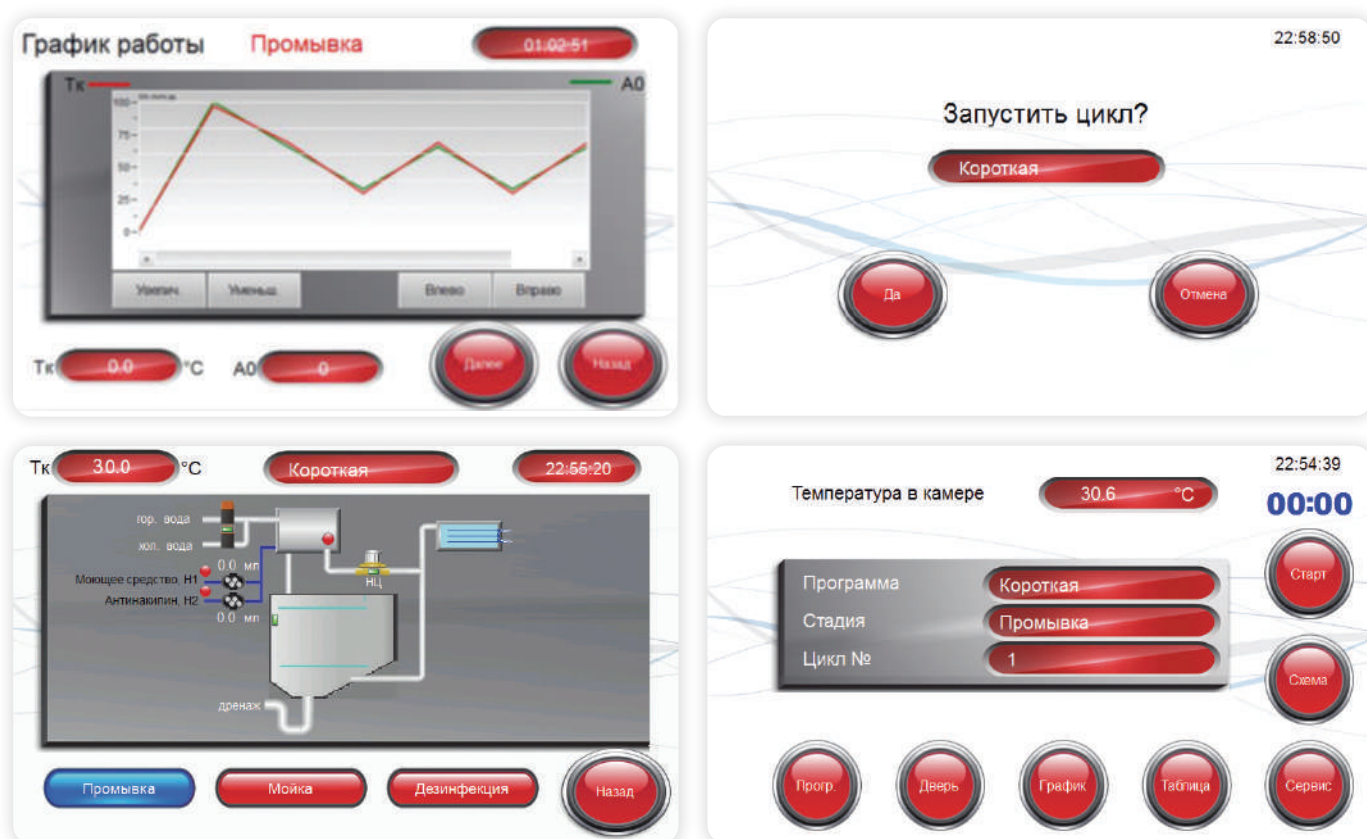

Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество дверей, шт.	1
Объем моечной камеры, л	80
Габаритные размеры (ГxШxВ), мм	600x550x1620
Масса, кг	110
Максимальная номинальная мощность, кВт	5
Напряжение / частота, В/Гц	380/50



СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ООО «Фармстандарт-Медтехника»

121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр.3

Тел/факс: 8 (495) 739-39-45

E-mail: sales@phs-mt.ru