



## Дезинфекционно-моечные машины Серия РHS МД

- 
- ◆ СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  - ◆ ГАРАНТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
  - ◆ ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
  - ◆ ПОСТОЯННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
  - ◆ РАЦИОНАЛЬНАЯ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

# Машина дезинфекционно-моечная PHS МД-150

Компактная установка, предназначенная для мойки и дезинфекции медицинских и других изделий, использующихся в медицинской, фармацевтической и ветеринарной практике.

## Основные характеристики:

- Камера и наружные панели выполнены из высококачественной нержавеющей стали
- Дверь изготовлена из нержавеющей стали
- Сушка горячим фильтрованным воздухом
- Конденсатор пара
- Интерфейс на русском языке
- 2 дозирующих насоса моющих средств
- Цветной сенсорный экран с диагональю 7"
- 40 программ обработки (20 предварительно установленных и 20 свободных)
- Онлайн подсчет значения параметра АО
- USB-порт

## Опции:

- Дверь со встроенным смотровым окном из жаропрочного стекла
- Подсветка камеры
- Дополнительный дозирующий насос химических средств
- Встроенный принтер
- Подставка




## Технические характеристики:

Параметр	Значение	Единицы измерения
Габаритные размеры (ШxГxВ)	910x685x890	мм
Полезный объем камеры	не менее 150	л
Вместимость	8 корзин DIN 1/1	шт.
Вес	160	кг
Потребляемая мощность	6	кВт

## Основные преимущества для пользователя:

- Экран цветной, сенсорный с диагональю 7"**
  - интерфейс на русском языке
  - наглядное отображение параметров цикла, интуитивно понятный интерфейс
- Простота управления**
  - наличие встроенных и пользовательских программ
  - возможность копирования параметров программ
  - возможность возврата к заводским настройкам
- Оптимальная комплектация**
  - в базовый комплект поставки входит 3-х уровневая загрузочная вставка и 6 сетчатых лотков DIN 1/1 (выгодно для пользователя по цене)
- Широкий ассортимент вставок** позволяет обрабатывать большое разнообразие изделий медицинского назначения

- Простота технического обслуживания**
  - удобное расположение внутренних схем и подключений
  - электроника расположена в верхней боковой части
  - архив аварийных ситуаций
- Встроенное смотровое окно и подсветка камеры**
  - в базовой комплектации машина оборудована дверью, выполненной из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации, а также удобство обработки внешних поверхностей
  - встроенное смотровое окно и подсветка (ОПЦИЯ): геометрия смотрового окна позволяет сохранить эксплуатационную надежность двери, при этом обеспечивает дополнительный визуальный контроль процесса обработки
- USB-порт**
  - возможность загрузки и копирования данных
  - возможность подключения принтера

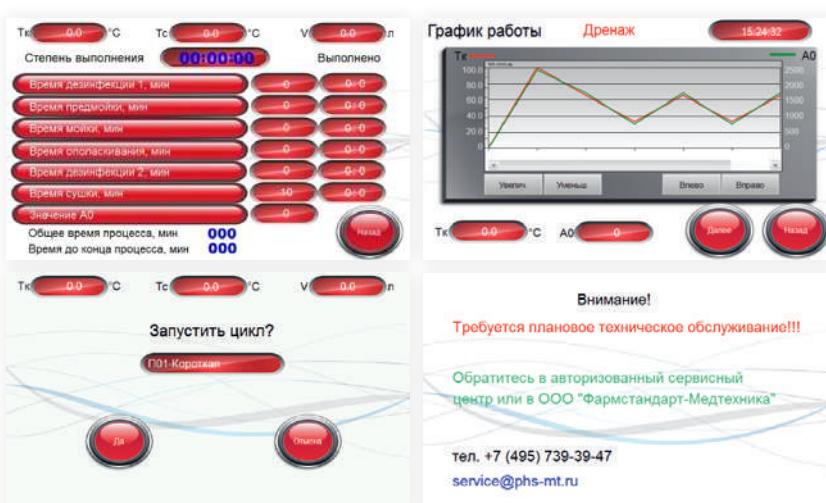

## Система управления (программное обеспечение собственной разработки):

- Мы предлагаем комплексное решение для дезинфекции и стерилизации, поэтому интерфейс дезинфекционно-моечных машин аналогичен интерфейсу наших стерилизаторов, что обеспечивает удобство и простоту эксплуатации.
- Параметры процесса отображаются на ЖК-экране в виде таблиц, схем и графика.
- Экран позволяет наблюдать за процессом обработки изделий медицинского назначения в режиме реального времени
- Запрос-подтверждение на ЖК-экране о необходимости выполнения операции с целью предотвращения риска ошибок оператора.
- Напоминание на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания.

# Машина дезинфекционно-моечная PHS МД-230

PHS МД-230, благодаря различным аксессуарам, может использоваться для мойки, дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов, медицинских принадлежностей, стоматологических инструментов, трубок, шлангов, анестезиологических принадлежностей, микрохирургического оборудования и инструментов, эндоскопического оборудования, медицинской обуви.

## Основные характеристики:

- Непроходное/проходное исполнение
- Цветной сенсорный экран с диагональю 7" (в случае проходного исполнения полноценный 7"-экран с обеих сторон)
- Русифицированный интерфейс
- Камера и наружные панели выполнены из высококачественной нержавеющей стали
- 2 перистальтических насоса
- 40 программ мойки (15 предустановленных и 25 пользовательских)
- Сушка горячим фильтрованным воздухом
- Встроенное смотровое окно
- Возможность разблокировки двери при отсутствии электропитания
- Онлайн подсчет значения параметра АО
- USB-порт

## Технические характеристики:

Параметр	Значение	Единицы измерения
Габаритные размеры (ШxГxВ)	670x760(730*)x1850	мм
Полезный объем камеры	не менее 220	л
Вместимость	10 DIN 1/1 корзин	шт.
Вес	280 (260*)	кг
Потребляемая мощность	9	кВт

\* — данные указаны для машин в непроходном исполнении



## Основные преимущества для пользователя:

- Цветной сенсорный экран с диагональю 7", интерфейс на русском языке**
  - наглядное отображение параметров цикла, интуитивно понятный интерфейс
  - полноценный 7" экран в зоне выгрузки при проходном исполнении
- Встроенное смотровое окно и подсветка камеры**
  - обеспечивают дополнительный визуальный контроль
  - подсветка входит в базовую комплектацию – экономия средств
- Простота технического обслуживания**
  - удобное расположение внутренних схем и подключений
  - архив аварийных ситуаций
- Оптимальная комплектация**
  - в штатной комплектации оснащается 4х-уровневой тележкой и 8 корзинами
  - широкий ассортимент загрузочных тележек и вставок позволяет подобрать индивидуальное решение под потребности пользователя
- Простота управления**
  - наличие встроенных и пользовательских программ
  - возможность копирования параметров программ
  - возможность возврата к заводским настройкам
- USB-порт**
  - возможность загрузки и копирования данных
  - возможность подключения принтера

## Система управления (программное обеспечение собственной разработки):



- Экран базы данных, предназначенный для табличного отображения температуры в камере, позволяет оператору наблюдать за процессом в режиме реального времени, сохранять данные на внешний носитель.
- Параметры процесса отображаются на ЖК-экране в виде таблиц, схем и графика.
- Запрос-подтверждение на ЖК-экране о необходимости выполнения операции с целью предотвращения риска ошибок оператора.
- Напоминание на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания.



СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

**ООО «Фармстандарт-Медтехника»**

121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр.3

Тел/факс: 8 (495) 739-39-45

E-mail: [sales@phs-mt.ru](mailto:sales@phs-mt.ru)