


Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диакомс»
Иванов И. Сиганов

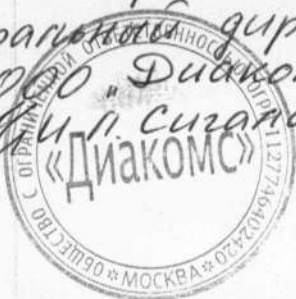

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО «Фирма Диакомс»

В.А. Аникин

« 25 » 2003 г.



**КРЕСЛО МАССАЖНОЕ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ НАКЛОНА СПИНКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДЛОКОТНИКА,
ПОДГОЛОВНИКА И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ
КМ - «Диакомс»**

ПАСПОРТ

АУКС.941126.036 ПС

Инв. № подл.	Подп. и дата	взам. инв. №	Подп. и дата

2003

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	4
5. Условия эксплуатации.....	4
6. Техническое обслуживание.....	4
7. Транспортирование и хранение.....	4
8. Свидетельство о приемке.....	5
9. Свидетельство об упаковке.....	5
10. Гарантии изготовителя.....	6
11. Сведения о рекламациях	7

					АУКС.941126.036 ПС							
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Кресло массажное КМ – «Диакомс»			Лит.	Лист	Листов		
Разработал	НИКИТИНА		05.08.03							2	.	
Проверил	ЗУЕНКОВ		05.08.03									
Нач. отдела												
Н. контроль												
Утвердил	АНИКИН		05.08.03		Паспорт							

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние кресла массажного КМ – «Диакомс»
зав. № _____.

1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, пометки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Кресло массажное КМ – «Диакомс», предназначено для проведения лечебного гигиенического массажа, мануальной терапии и других физиотерапевтических манипуляций.

Кресло снабжено поворотными механизмами, позволяющими менять его конфигурацию путем наклона его частей: спинки и подножника.

Конфигурация кресла предусматривает возможность регулировки подлокотников и подголовника.

Кресло может быть использовано для оснащения клиник, больниц, массажных кабинетов и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.

Кресло изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150.

По устойчивости к механическим воздействиям кресло относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	Количество
Кресло массажное КМ - «Диакомс» Паспорт	АУКС.942819.036	1
	АУКС.942819.036 ПС	1

Представитель ОТК _____
подпись, дата

					АУКС.941126.036 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло массажное КМ – «Диакомс» зав. № _____

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

_____ подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кресло массажное КМ – «Диакомс» зав. № _____

упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

М.П. _____

Упаковку произвел _____

Подпись _____

Кресло массажное КМ – «Диакомс» после упаковки

принял _____

Подпись _____

					АУКС.941126.000 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Габаритные размеры, мм, – 1150x700x1450...1550 (длина, ширина, высота);

В разложенном положении – 1950x700x650 (длина, ширина, высота).

4.2 Масса - 30 кг.

4.3 Кресло должно выдерживать нагрузку весом до 150 кг.

4.4 Поворотный механизм спинки кресла обеспечивает изменение угла наклона спинки из вертикального положения до горизонтального.

4.5 Поворотный механизм подножной части кресла обеспечивает изменение его угла наклона + 60° относительно горизонтального положения.

4.6 На боковых кронштейнах кресла при помощи установочных винтовых зажимов должны закрепляться подлокотники.

4.7 На спинке кресла при помощи установочного винтового зажима закрепляется подголовник.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация кресла должна производиться в закрытых помещениях.

В процессе эксплуатации не допускайте царапин, порезов и механических повреждений изделий, входящих в комплект.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в регулярном внешнем осмотре кресла и удалении возникающих в процессе эксплуатации загрязнений мягкой тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Кресло допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

Хранение кресла должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отопливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1 по ГОСТ 15150.

					АУКС.941126.036 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Кресла массажного КМ – «Диакос» требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода Кресло массажное КМ – «Диакос» в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.

10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в медицинский комплект вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.



Рис.1

					АУКС.941126.000 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 11.1 В случае возникновения поломок Кресло массажное КМ – «Диакомс», в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание комплекта массажного.

- 11.2 Гарантийное обслуживание комплекта массажного производит предприятие «Фирма Диакомс», расположенное по адресу:
111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14а., стр.45
Тел./факс: (495) 361-55-37, (495) 361-55-68.

- 11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					АУКС.941126.036 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		